

Provetscan SR-2C

Ecografía de alta resolución para
vacuno y equino



Manual de Usuario

Introducción

Las sondas sin cables SR-2C son la última generación de instrumentos de ultrasonografía para el diagnóstico reproductivo.

A diferencia de los ecógrafos tradicionales de veterinaria con un cable conectado a la sonda, la SR-2C no tiene cable, es inalámbrica.

La sonda SR-2C integra el procesador de imagen de ultrasonidos, la fuente de alimentación y un módulo de señal inalámbrica para conectarse a la unidad principal.

Ahora la unidad principal se ha sustituido por una tablet. La sonda actúa como un punto de acceso Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, y muestra la imagen a través de la aplicación VetUS.

Este manual tiene por objeto proporcionar una visión general y debe leerse cuidadosamente antes de comenzar el uso del dispositivo.

1. Características

Pantalla: iPad series
Escaneo: Lineal
Sonda: Transductor de 6,5 / 8 MHz
Profundidad: 40-100 mm
Modo Display: Modo B, BM, Color, PDI y PW
Escala de grises: 256 niveles
Duración de batería: 6 horas de trabajo continuo
ó 14 horas en stand by.
Tamaño de la unidad principal: 180 x 63 x 20mm
Longitud del cable de exploración: 1,8 m.
Peso: 400

2. Inicio

Para su protección, por favor lea estas instrucciones de seguridad antes de poner en marcha la sonda.

2.1 Desempaquetando

La sonda SR-2C está cuidadosamente embalada para evitar daños durante el transporte. Antes de abrir la maleta tenga en cuenta cualquier daño visible en el exterior de la misma durante el transporte.

Los artículos deben ser revisados con el fin de asegurar que todos se han recibido. La siguiente tabla muestra los elementos que deben ser incluidos:

Artículos	Incluidos
Sonda de ultrasonidos SR-2C	✓
Cable USB para carga	✓
Maleta de transporte	✓
Cargador wireless	✓

Cada artículo debe ser examinado para comunicar defectos o daños que pueden haber ocurrido durante el envío aunque se haya empaquetado cuidadosamente. Si esto sucediera, por favor contacte con su distribuidor inmediatamente para informar del problema.

2.2 Instalando la aplicación (App)

Si la aplicación VetUS no está instalada en su tablet, vaya a la App Store y búsquela. Puede instalarla gratuitamente.

2.3 Conectando la sonda

El indicador de conexión Wi-Fi y el de la capacidad de batería deben estar apagados antes de conectar la sonda.

Presionar el botón (1) de ON/OFF. El indicador de capacidad de batería (5) indicará cuanta batería le queda. Este indicador está dividido en cuatro niveles.

Segundos después de conectar la sonda, el indicador de conexión Wi-Fi (6) parpadeará y, de este modo, estará lista para conectarse con el dispositivo móvil.

Presionar el botón ON/OFF (1) durante tres segundos para apagar la sonda. Cuando la sonda esta apagada, los indicadores luminosos (5) y (6) también estarán apagados.

Además, esta sonda Wi-Fi, dispone de otros 3 botones: (2) para modificar la profundidad, (3) para bajar la ganancia y (4) para subir la ganancia.



2.4 Conexión Wi-Fi

Cuando la sonda está esperando para una conexión Wi-Fi, ir a ajustes del iPad, y buscar la SSID de la sonda. La SSID es por ejemplo "SR-2C GVCJDA001". Conectar la SSID con la contraseña, que es la misma que el número de serie que está grabado en la parte

inferior de la sonda. La contraseña sería por ejemplo "WRPCJDA001".

Las letras de la contraseña deben escribirse en minúsculas.

Una vez conectada a la red Wi-Fi, iniciar la aplicación VetUS. En el momento que empezemos a trabajar con la sonda, el indicador de señal Wi-Fi ya no parpadeará del mismo modo.

3. Funciones de la app


Una vez conectada la sonda, iniciar la app, y se mostrará la pantalla principal. No se muestra ninguna imagen cuando se abre la aplicación por primera vez.

3.1 Escaneo de ultrasonidos.




En la parte superior izquierda se mostrará la red de la sonda conectada.

Descripción de los botones de la app:

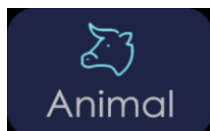

Al presionar el botón "Animal" aparece una ventana emergente para introducir el tipo de animal y los siguientes campos:

Presionando sobre la imagen del Animal se muestran tres posibilidades: ganado vacuno, equino e inespecífico.

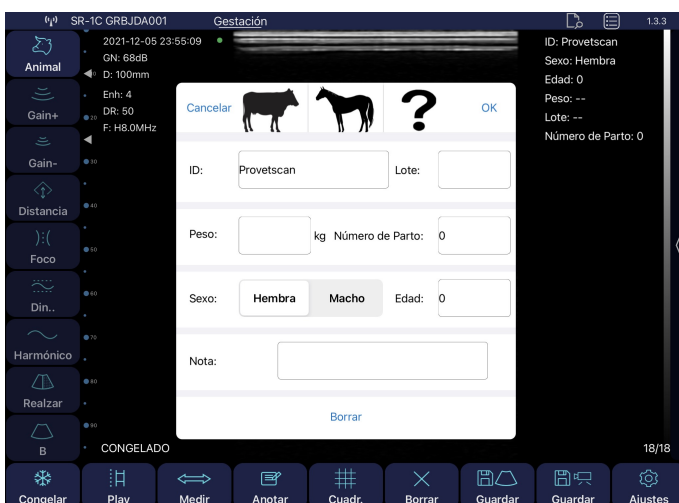

ID: número de identificación de animal con caracteres alfanuméricos.

Batch: número de lote con caracteres alfanuméricos.

Weight: peso del animal.

Farrowing No.: Número de parto (no se muestra cuando se selecciona Male/macho)

Gender: selecciona macho o hembra

Age: edad del animal


Note: para introducir anotaciones o diagnósticos del animal.

Todos estos campos se grabarán en el archivo CSV que se genera cuando exportamos los datos almacenados en la aplicación.

El GAIN es la capacidad de modificar la amplitud del eco (magnitud de onda ultrasónica), resultando una imagen más o menos brillante. Los cambios de la ganancia general afectan a toda la imagen por igual.




Sube la ganancia del escaneo hasta 105 dB.

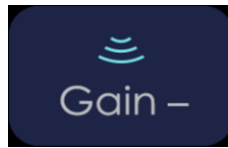

Baja la ganancia del escaneo hasta 30 dB.

Profundidad


Podemos trabajar a más o menos profundidad, y para ello presionaremos el siguiente botón.

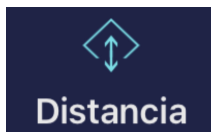

Selecciona los 4 zoom disponibles de 40, 60, 80 y 100 mm. También se puede ajustar deslizando el dedo en medio de la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Foco


Es la máxima concentración de líneas dentro del haz de ultrasonidos. Por tanto hay que situar el foco a la altura de la zona de interés.

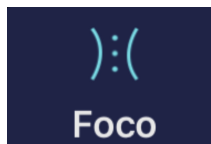

Ajusta el foco en el cual se desea obtener la mejor imagen, subiéndolo y bajándolo en la pantalla.

Rango dinamico

Es el proceso por el cual se reduce o aumenta la diferencia entre los ecos de mayor y menor amplitud. Lo que variamos con el Rango Dinámico es la amplitud de la señal representada en la escala de grises. A valores bajos la imagen es más contrastada. Al aumentarlo se suaviza la imagen.

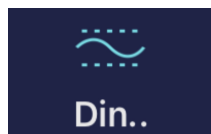

El rango de valor va desde 40 a 110. Valores inferiores aumentan el contraste de la imagen.

Frecuencia


Hay que seleccionar la frecuencia adecuada a la exploración. A mayor frecuencia menor penetración y viceversa. Con la Imagen Armónica, la señal de retorno no sólo incluye la frecuencia de base, sino que también incluye la que corresponde al doble de la misma. El ecógrafo procesa separadamente ambas señales, eliminando la frecuencia básica con el ruido que conlleva.



Cambia la frecuencia del escaneo de 6,5 a 8 MHz

Denoise


Es un algoritmo para suprimir el moteado, suavizar la imagen de los órganos y hacer el borde de los tejidos más tenues. Valores más bajos incrementa el ruido de la imagen y valores más altos lo reducen.

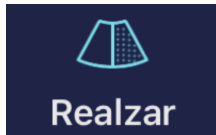

Reducción del grano de la imagen. Rango de valor de 0 a 3.

Modo B

Representación bidimensional de los ecos reflejados en forma de puntos luminosos de claridad variable dependiendo de su frecuencia y profundidad.

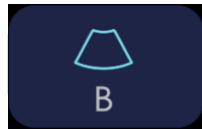

Presionando este botón se muestran las opciones de la ecocardiografía con los modos BM, Color, PDI y PW. Más información en el punto 3.2.

Freeze

Podemos poner la sonda en stand by deteniendo la imagen para valorar aspectos con más atención. El consumo de la sonda es inferior a la mitad del consumo que tiene en modo LIVE.



Congela (freeze) y descongela (live) la imagen.

Play


Este equipo dispone de una grabación permanente de una secuencia de vídeo (Cine Loop) de los últimos 100, 200, 500 ó 1000 fotogramas. A medida que se van grabando nuevos fotogramas, se van eliminando los primeros. Para cambiar el tamaño del Cine Loop, iremos al botón de ajustes.



Una vez congelada la imagen, reproduce el Cine Loop guardado.

Mediciones


Dispone de tres modos de mediciones: longitud, área/circunferencia y trazo. La medición se realizará, una vez seleccionado el modo, con el dedo sobre la pantalla, situando los cursores allá donde queramos realizar la medición para el modo de longitud, o dibujando el área deseada para los modos de área, circunferencia y trazo.

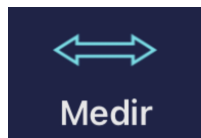

Presionamos este botón para desplegar el menú donde se muestran las mediciones de longitud, área / circunferencia y trazo, y las de cálculo de gestación si se ha seleccionado ganado vacuno o equino.

Cálculo de edad de gestación:

Cuando se ha seleccionado el ganado vacuno se pueden realizar las siguientes mediciones:

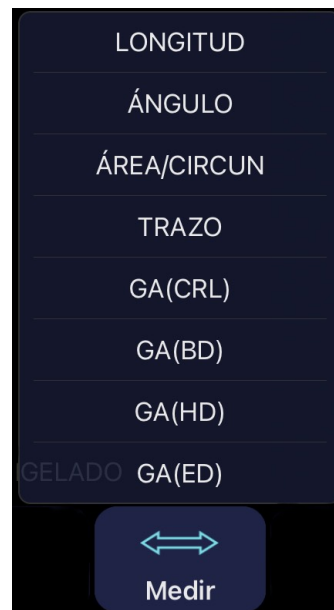

GA (CRL): Crown to Rump Length. Calcula la edad de gestación en función de la distancia desde la parte superior de la cabeza y la parte final de la cadera del feto.



GA (BD): Body Diameter. Calcula la edad de gestación en función del diámetro máximo del cuerpo/tórax del feto.



GA (HD): Head Diameter. Calcula la edad de gestación en función del diámetro máximo de la cabeza del feto.



GA (ED): Eye Diameter. Calcula la edad de gestación en función del diámetro del ojo del feto.

Cuando se ha seleccionado el ganado equino se pueden realizar las siguientes mediciones:

Nota: una vez que se hace la medición de gestación, automáticamente te indica la fecha prevista de parto (EDD)




GA (ED): Eye Diameter. Calcula la edad de gestación en función del diámetro del ojo del feto.



GA (EVD): Embryonic Vesicle Diameter. Calcula la edad de gestación en función del diámetro máximo de la vesícula embrionaria.

Anotaciones

Posibilidad de realizar anotaciones en cualquier lugar de la pantalla. Podemos introducir caracteres alfanuméricos. Si una vez introducido el comentario en la pantalla, se guarda la imagen, lo hará con la anotación incluida.

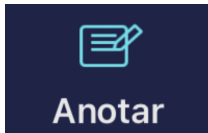

Genera una ventana en el lugar de la pantalla donde se haya presionado con el dedo y se despliega el teclado para escribir.

Grid o Cuadrícula

Para tener una orientación de lo que pueden medir determinados órganos, tamaño del feto, u otras estructuras, se puede trabajar con una cuadrícula sobrepuesta en la pantalla.



Activa o desactiva la cuadrícula en la pantalla.

Cambio de dirección de escaneo

En el modo de escaneo, presionamos en este botón para cambiar la dirección de escaneo.



Se muestra con un punto verde en la parte superior derecha o izquierda de la imagen ecográfica. Si el punto está a la derecha, indica que la imagen se empezará a visualizar por la derecha a medida que vamos introduciendo la sonda por el recto. Si estuviera a la izquierda, sucedería al contrario.

Borrar



Presionando este botón se borrarán todas las mediciones y anotaciones que haya en la pantalla.

Guardar Imagen y datos de diagnóstico

Una vez congelada la imagen, tendremos almacenado en el Cine Loop 100, 200, 500 ó 1000 imágenes que pueden ser guardadas en el carrete. Deslizando el dedo en medio de la pantalla hacia la izquierda o a la derecha, seleccionamos la imagen que deseamos para ser guardada.




Guarda una captura de pantalla de la imagen seleccionada en el carrete.

Al mismo tiempo que se ha guardado una imagen, se muestra una ventana emergente en la cual se pueden ver los datos de diagnósticos guardados. Esta ventana se cierra automáticamente en unos tres segundos.




Si se desea ver la tabla de todos diagnósticos, hemos de presionar en el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la imagen:

Un ejemplo de datos de diagnóstico guardados en la memoria de la aplicación puede ser el siguiente:

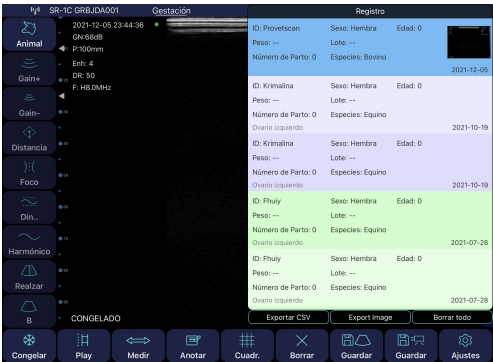

ID	Provetscan	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Bovino		2021-12-05
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28


Este archivo estará incluido dentro de una carpeta con la fecha actual.

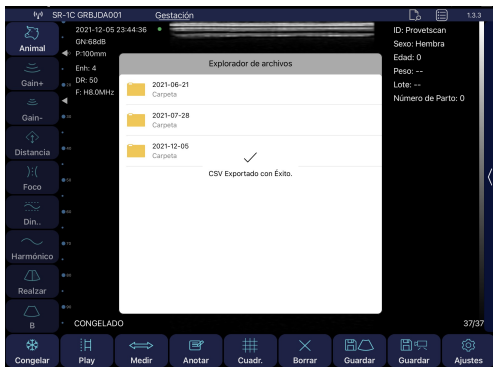

Nombre	Fecha	Tipo
2021-06-21		Carpeta
2021-07-28		Carpeta
2021-12-05		Carpeta

CSV Exportado con Éxito.

Podemos obtener una vista previa del archivo CSV generado presionando en el icono del archivo.

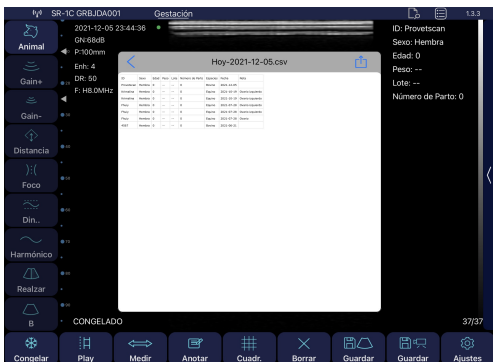


ID	Provetscan	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Bovino		2021-12-05
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28

Si se desea acceder a las carpetas guardadas contenedoras de los archivos CSV generados, hemos de presionar en el siguiente icono que figura en la parte superior derecha de la pantalla:



Una vez se muestra esta tabla tenemos la posibilidad de eliminar todos los datos de diagnóstico (RemoveAll) o exportar dichos datos (ExportFile). En el caso de elegir "ExportFile", aparece una nueva ventana emergente para nombrar el archivo CSV que se genera junto con la fecha actual:

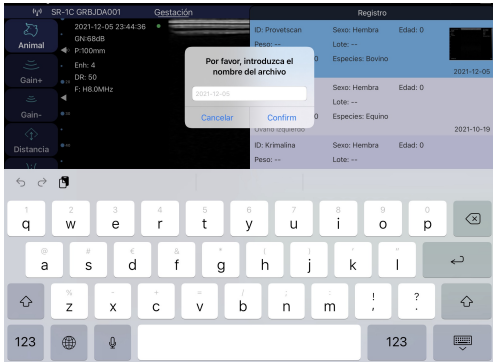


Por favor, introduzca el nombre del archivo

2021-12-05


Cancelar Confirmar

Y es aquí, dentro de la carpeta, donde vemos el archivo CSV generado. Este archivo se abre de forma automática con Excel aunque también se puede abrir en Numbers.

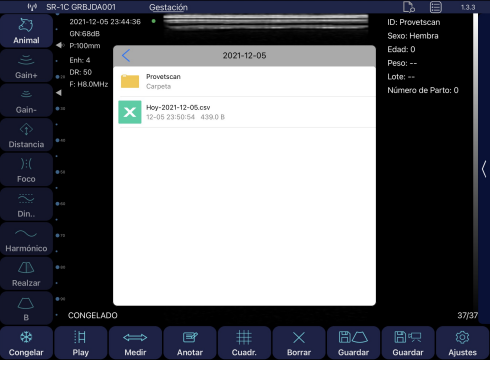

ID	Provetscan	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Bovino		2021-12-05
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28

Ahora tenemos la posibilidad de compartir este archivo con aplicaciones que tengamos en el iPad y guardarlos en ellas on en la aplicación de Archivos:

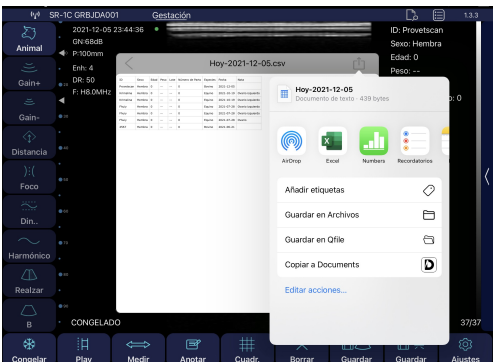

ID	Provetscan	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Bovino		2021-12-05
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Kriminalia	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-10-19
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28
ID	Phuly	Sexo	Hembra	Edad	0
Peso	--	Lote	--		
Número de Parto	0	Especie	Equino		2021-07-28

Guardar Video


Al congelar la imagen, como en el caso anterior, se detiene la grabación del Cine Loop y toda la secuencia de fotogramas pueden ser guardados. Corresponderá a videos de 10, 20, 50 ó 100 segundos.



Guarda en el carrete el Cine Loop que se haya estado almacenando hasta que presionamos Freeze.

Ajustes

Muestra los ajustes que se pueden realizar en el equipo.

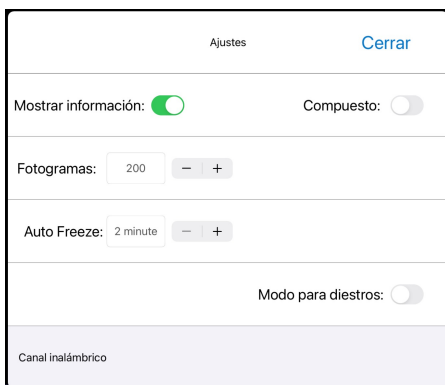

Presionando este botón se abre una ventana emergente en la cual se pueden modificar los siguientes parámetros:


- Mostrar información: muestra u oculta la información de los parámetros en la pantalla.
- Modo para diestros: Si lo activamos, los botones que se muestran de forma predeterminada a la izquierda, se mostrarán a la derecha. Así será más cómodo para usuarios que exploran con la mano izquierda.
- Compuesto: Procesa más la imagen para mostrarla más suavizada pero por contra la imagen es más lenta.
- Fotogramas: grabación temporal que se va realizando a medida que realizamos la ecografía. Se guardarán los últimos 100, 200, 500 ó 1000 fotogramas.
- Auto Freeze: Selección del tiempo de espera a partir del cual se congela la imagen para ahorrar energía.
- Canal inalámbrico: Ajustes de los canales Wifi 2,4 GHz o 5GHz. En caso de conflicto con otros canales de otras redes wifi que haya cerca, se puede cambiar el canal para que no haya interferencias. Si se cambia el canal se perderá la contraseña de la sonda y habrá que introducirla de nuevo. Ver punto 2.4 de este manual.

Además de estos botones, tenemos un menú desplegable en la parte superior izquierda en el que se pueden seleccionar hasta 6 preajustes.



Los 4 primeros, **OVARY**, **UTERUS**, **PREGNANCY** y **ADVANCED PREGNANCY** están preconfigurados de fábrica y aunque se pueden modificar, cada vez que presionamos a uno de ellos se volverá a los valores memorizados.

Los 2 siguientes, **USER1** y **USER2**, son configurables por los usuarios. Se quedarán memorizados siempre los últimos valores que estaban justo antes de cerrar la app para que al volver a trabajar se muestren los últimos ajustes establecidos.

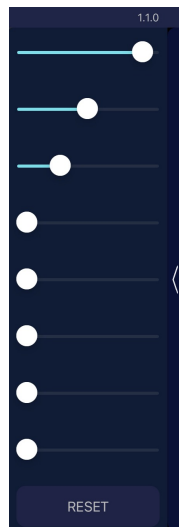

Finalmente, presionando sobre la barra vertical en el lateral derecho podemos desplegar los 8 tramos de **TGC** para ajustar la ganancia deseada correspondiente en cada zona.

Deslizando cada uno de los botones a la derecha incrementaríamos la ganancia a esa altura de la pantalla. Deslizándolo a la izquierda, la disminuiríamos. Presionando **RESET**, volvemos a los ajustes del TGC de fábrica.


Nota: Sólo estarán disponibles los botones iluminados en blanco.

En la parte inferior derecha se puede ver un número que indica la imagen actual grabada del Cine Loop (100/100). El usuario puede deslizar el dedo en el medio de la pantalla a la izquierda o a la derecha para seleccionar la imagen deseada.

Así pues, se puede guardar cualquier fotograma de 1/100 a 100/100 presionando el botón "Save image".


En la parte inferior izquierda de la pantalla se podrá leer "LIVE" cuando la sonda este en movimiento, o se mostrará "FREEZE" cuando la imagen este congelada.

3.2 Funciones especiales: Ajustes en Modo BM y Doppler

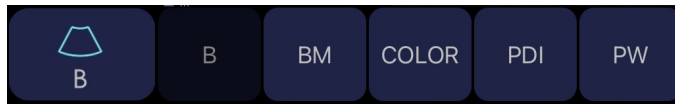


Tal y como se explicaba en el punto 3.1, presionando en el botón “B”, podemos acceder al resto de las funciones especiales de la ecografía: modos BM, Color, PDI y PW.

3.2.1 Modo BM

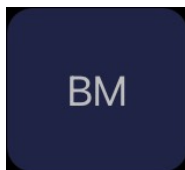


El Modo M representa el movimiento de toda la información recogida a lo largo de una línea que situamos sobre la imagen. Nos permite analizar de forma gráfica las superficies que están en movimiento y cuantificarlas. En este botón se combinan los modos B (ecografía 2D) y el M (en movimiento). Las señales M son presentadas en el eje horizontal del monitor.

3.2.2 Modo COLOR

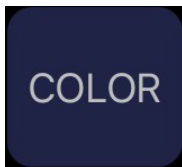

El efecto Doppler es el cambio de frecuencia que experimenta una determinada onda transmitida detectada por un receptor debido a ciertas condiciones de movimiento entre el receptor, el transmisor, el medio y las superficies reflectantes. El cambio en la frecuencia se produce por el efecto que produce el movimiento sobre la velocidad de la onda que se propaga entre el transmisor y el receptor.

El Doppler color codifica la dirección del flujo en dos colores. Por convención, el color rojo es el flujo que se acerca al transductor y el azul aquel que aleja del transductor. Los cambios de tono indican, además, la velocidad circulatoria: los tonos brillantes indican alta velocidad, los tonos apagados baja velocidad circulatoria. Cuando la velocidad de flujo es demasiado elevada, el flujo laminar se convierte en turbulento (múltiples velocidades en un mismo sitio al mismo momento), siendo representado en ese caso por el agregado del color verde al rojo-amarillo o azul-blanco subyacente, generando así un patrón mosaico.




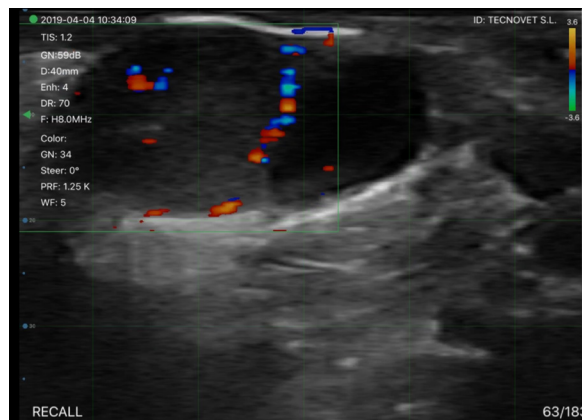


Ajustes del modo Color:




Steering consiste en oblicuar el cuadro Doppler. El ángulo de incidencia entre la línea de propagación y la dirección del flujo debe ser de 45° - 60° . Debido a la fórmula que rige el principio del Doppler, pequeños cambios en ángulos mayores de 60° producen errores de velocidad, mucho mayores que pequeños cambios en ángulos por debajo de 60° .

En este caso, hay que reubicar el transductor o utilizar la técnica de Steering. Podemos variar el ángulo en $\pm 7^{\circ}$.

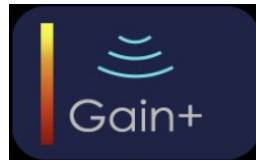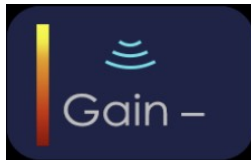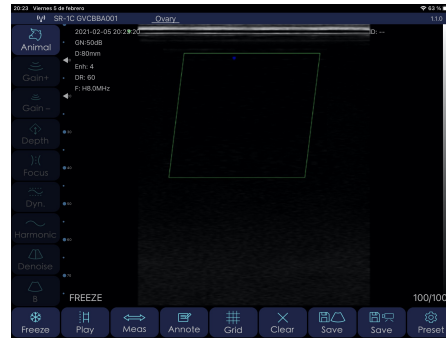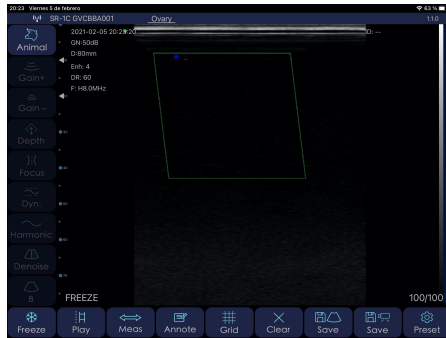


Además del ajuste de Ganancia del modo B, podemos ajustar la Ganancia del modo Color de forma independiente. De esta forma se amplifica o disminuye la señal recibida viendo más o menos irrigación vascular. Se aconseja que el color rellene la luz del vaso, de una pared a otra.

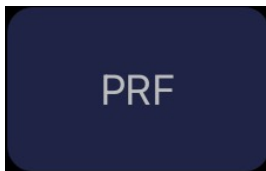

El PRF o Frecuencia de Repetición de Pulsos es un parámetro que ajusta el operador que define la tasa o frecuencia a la que el transductor va a emitir pulsos de ultrasonido para muestrear. Está relacionada con la velocidad del flujo a estudiar, de manera que si ésta es alta, requiere una alta tasa de muestreo para obtener datos fiables y por tanto el PRF ha de ser alto.



El WF o Filtro de Pared es un sistema que permite ignorar las señales de baja frecuencia (y alto ruido) que provienen del movimiento de otras estructuras como la pared del vaso. El filtro alto elimina el flujo de baja velocidad, adyacente a la línea de base. En el caso de no detectar flujo en un vaso puede ser porque su velocidad sea muy baja y esté siendo filtrado. En este caso habría que cambiar a un filtro bajo.

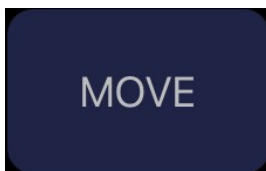

MOVE sirve para mover con el dedo el cuadro de exploración del Doppler cuando este botón está seleccionado. Si se presiona este botón cambiará a SIZE.



Cuando está activado el botón SIZE se puede ajustar el tamaño del área de explotación. Se aconseja que el tamaño de la "caja" sea lo menor posible, sobre todo en anchura, y que ésta se localice lo más superficial posible, ya que implica mayor número de fotogramas por segundo y la imagen se formará más rápidamente.

3.2.3 Modo PDI

Analiza el cambio de amplitud y lo codifica en escala de color, es decir, representa la potencia integrada de la señal Doppler en lugar de su cambio de frecuencia. Por tanto, no proporciona información sobre la velocidad del flujo y es menos dependiente del ángulo Doppler. Únicamente señala la presencia de flujo en una estructura, siendo más sensible para detectar flujo lento que el Doppler color. Tampoco aporta información sobre la dirección del flujo.



Ajustes del modo PDI:

Aunque el análisis que se realiza de los fluidos es diferente al COLOR, los ajustes que se ofrecen en el Modo PDI son los mismos que en el Modo COLOR.

Consultar los “ajustes del modo color” del apartado 3.2.2 para modificar el STEER, GAIN+, GAIN-, PRF, PW, MOVE y SIZE.





3.2.4 Modo PW

También conocido como Doppler Espectral o Doppler Pulsado, analiza la velocidad del flujo del vaso insonado en función del tiempo. La morfología de la onda obtenida ilustra la hemodinámica de dicho vaso.


Ajustes del modo PW:



Presionando el botón STEER podemos cambiar la inclinación de la línea de corte en una inclinación de $\pm 7^\circ$.

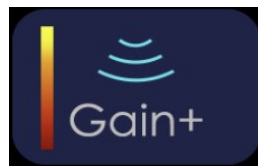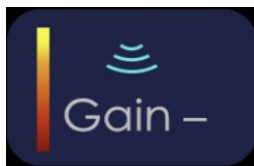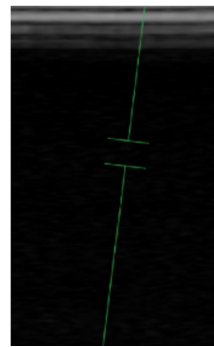
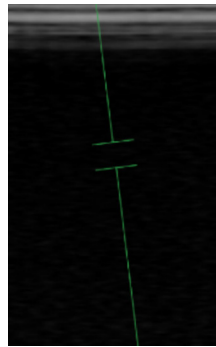


La ganancia espectral amplifica o disminuye la señal en la línea base. Lo ideal es que sea aquella que permita delinear de forma correcta el contorno de la onda superior e inferiormente.

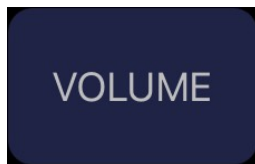

VOLUME es el espacio en el que se mide el cambio de frecuencia Doppler. En Doppler Pulsado el Volumen de Muestra está representado por un cursor (Ventana Doppler), cuya amplitud la podemos variar en función del ancho o diámetro del vaso.


Conviene situarlo en el centro del vaso, ocupando unas $2/3$ partes de su diámetro.

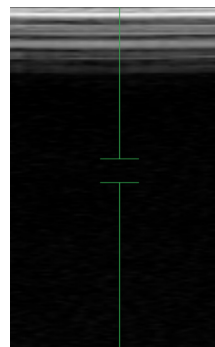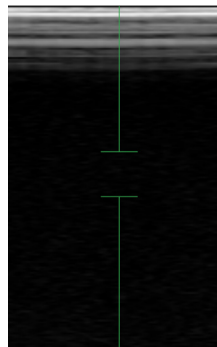




ANGLE se usa para modificar el ángulo de medición en la ventana de VOLUME. Una vez que la imagen obtenida en escala de grises es adecuada, para medir la velocidad del flujo de dicha estructura de manera fiable es necesario ajustar el ángulo Doppler. Por defecto el ángulo asignado es 0°.

Una sobrecorrección del ángulo (menor de lo real) conlleva la medición de velocidad del flujo falsamente bajas, y una infracorrección del ángulo la velocidad del flujo se sobreestima.

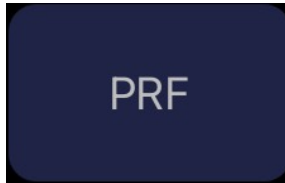


Tal y como se comentaba en los ajustes del Modo COLOR en el punto 3.2.2, el PRF o Frecuencia de Repetición de Pulsos es un parámetro que ajusta el operador que define la tasa o frecuencia a la que el transductor va a emitir pulsos de ultrasonido para muestrear.

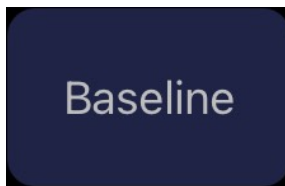

Con la función BASELINE se puede modificar la línea de base que permite destacar ciertos aspectos del flujo. Al aumentar la aceleración del flujo, hay que aumentar la PRF para evitar errores. Si no se puede aumentar más y la curva es predominantemente positiva o negativa, se puede ajustar la escala bajando o subiendo la línea de base.

Mediciones en modo PW

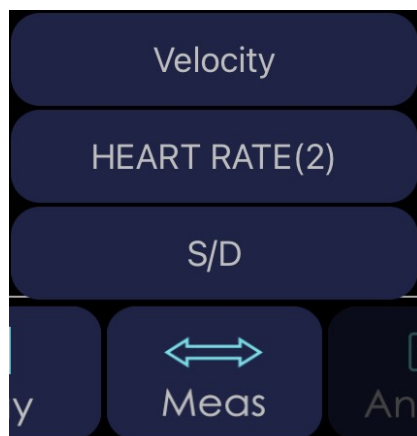


Una vez realizada la exploración, en el modo PW podemos realizar las siguientes mediciones:

VELOCITY: Situaremos el cursor en la parte más distal de la línea base de forma vertical para calcular la velocidad del flujo.

HEART RATE (2): Realizando una medición con dos cursores a lo largo de la horizontal y entre 2 picos, calcularemos la frecuencia cardíaca. Con la escala que se muestra, el resultado final es del doble de la frecuencia real.

S/D: Se utiliza para realizar las mediciones a nivel cardíaco del Peak Sistólico (PS), la Diastólica final (ED) y la relación entre ambos (S/D).

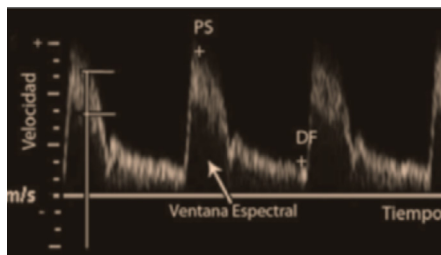

Nota: Todos los valores de los ajustes deben hacerse en cada momento de la exploración, en función del área explorada, profundidad del órgano a explorar, diámetro de los vasos sanguíneos, flujo de dichos vasos y ángulo de escaneo.

4. Mantenimiento

4.1 Carga de la sonda

Cuando se agote la batería necesitaremos recargarla. Se puede realizar con un cargador inalámbrico. A la plataforma de carga, que no está incluido de serie, se le conecta su cable USB y el cargador del dispositivo móvil.

Cuando se conecta el cargador, por medio del cable USB, a la plataforma se ilumina el led de color verde.

Se recomienda utilizar un cargador de 2A y 5V, y el cable original de la base de carga inalámbrica.

Cuando se esté cargando la batería, los niveles indicadores estarán parpadeando hasta que se produzca la carga total. Entonces los cuatro niveles estarán visibles y sin parpadear. La carga de la batería puede durar hasta 6 horas.



La duración de la batería es de 6 horas de funcionamiento continuo y de 14 horas en stand by. De este modo, se recomienda encarecidamente que si no se está realizando la exploración, entre un animal y otro, se congele la imagen para ahorrar batería en el caso de necesitar trabajar durante muchas horas al día.

La duración del iPad es de alrededor de 9 horas dependiendo de la luz ambiental. Si hay mucha luz, se incrementará el brillo del iPad para compensarla y el consumo será mayor.

4.2 Resistencia de la tablet

Para evitar que la tablet se ensucie con polvo y que se pueda humedecer o mojar, se incluye una funda "waterproof" que es resistente a salpicaduras y resistente al entrada de polvo.

Como recomendación particular sugerimos la adquisición una funda IP68 para iPad mini que además resista caídas de 1,2 m.

4.3 Limpieza

Se requiere una limpieza periódica de la sonda. La parte de la sonda que se introduce en el recto tiene un nivel de protección contra el agua y polvo de IP68, es decir, resiste la entrada de polvo y agua, pero la parte electrónica (de color Beige) **No es sumergible**. Podemos utilizar un paño o papel húmedos para limpiarla.

4.4 Almacenamiento

Durante el almacenamiento de la sonda se recomienda encarecidamente que la temperatura no sea inferior a 15°C. En el caso de que bajara la temperatura de la sonda o del dispositivo móvil, deberíamos calentarlos antes de usarlos.

Otra recomendación: respecto a la carga de la batería, si la sonda y la tablet no se van a utilizar durante una temporada larga, se recomienda almacenarlas con la carga completa.

5. Anexo

Para la protección del medio ambiente y de acuerdo con la normativa vigente, el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos o el fabricante. En nuestro firme compromiso con el medio ambiente, ponemos al servicio del usuario la recogida gratuita del equipo para desecharlo según la normativa vigente. Se entregará al usuario un certificado de dicho proceso de reciclaje. Para más información, consulte a su asistente comercial.

6. Declaración de Conformidad

Por la presente, NEW VETEC SL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico (modelo sonda) es conforme con la directiva 2014/53/UE.

New VeTec S.L.	Expediente Técnico	
	Ecógrafo PROVETSCAN SR-2C	Marzo 2021
		Edición 1



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE
(de acuerdo con la norma ISO/IEC 17050-1:2004)
EU DECLARATION OF CONFORMITY
(according to ISO/IEC 17050-1:2004)

Fabricante del producto: New VeTec S.L.
Product manufacturer

New VeTec S.L.

Dirección: Calle Moisés de León nº 52 Bajo. 24006 de León.
Address

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

Nombre: ECÓGRAFO DE ALTA RESOLUCIÓN PARA VACUNO Y EQUINO
Name: HIGH RESOLUTION ULTRASOUND SCANNER FOR DIAGNOSIS IN CATTLE AND HORSES

Marca/Modelo: New VeTec S.L. / PROVETSCAN SR-2C
Model/Reference

CUMPLE LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO:
CONFORMS WITH THE REQUISITES OF THE REGULATION

Directiva 2014/53/UE sobre Equipos Radioeléctricos
Directiva 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética
Directiva 2011/65/UE sobre RoHS

Directive 2014/53/EU relating RED

Directive 2014/30/EU relating EMC

Directive 2011/65/EU relating RoHS

NORMATIVA APLICABLE:
APPLICABLE STANDARDS:

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1	IEC 62321-3-1:2013	UNE-EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1	IEC 62321-4:2013+A1:2017	UNE-EN 55024:2010
ETSI EN 300 328 V2.1.1	IEC 62321-5:2013	UNE-EN 61000-3-2:2014
UNE-EN 62479:2010	IEC 62321-6:2015	UNE-EN 61000-3-3:2013
UNE-EN 60950-1+ A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	IEC 62321-7-1:2015	EN IEC 63000:2018
	IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017

Marzo (March) 2021, Madrid
Fecha y lugar (Date and place)

Nombre, cargo y firma
(Name, position and signature)



New Vetec, S.L.

CIF: B42834465

Moises de León, 52 Bajo - León (España)

Tel. 633 913 164 e-mail: roberto@provetscan.com

www.newvetec.com www.provetscan.com